


TME bipolar-bifurcated

Temporäre Myokard-Elektrode mit bipolarer Verzweigung

Temporary Myocardial-Lead with bipolar bifurcation

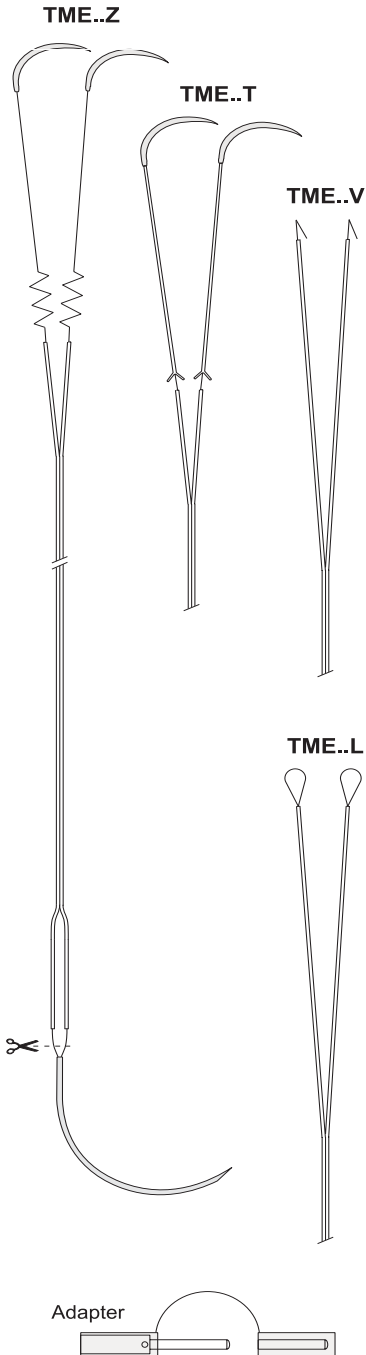

Artikelbeschreibung

TME werden zur optimalen Therapie postoperativer Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Die Verankerung im Myokard erfolgt entweder durch eine Zick-Zack Biegung im Herzdraht (Typ: TME..Z) oder durch Anker/Tines (Typ: TME..T). TME mit V- bzw. L-Verankerung (Typ: TME..V, TME..L) werden zur atraumatischen Fixierung (mittels chirurgischem Nahtmaterial) für die atriale Stimulation eingesetzt. TME können per Adapter direkt am externen Herzschrittmacher angeschlossen werden, wozu die Thoraxnadel abgeschnitten und die freiliegenden Drahtenden an den Adaptern fixiert werden.

Anzahl der Pole:bipolar
 Länge:60 cm / 220 cm
 Drahtmaterial:Edelstahl
 Isolierung:Polyethylen
 Außendurchmesser Isolierung:2x 0,45 mm
 Farbe:blau / blau
 Herznadel:gebogen
 Thoraxnadel:gebogen
 Elektroden:Edelstahlitze
 Litzendurchmesser:2x 0,20 mm
 Oberfläche:2x 10 mm² (TME..Z, TME..L) bzw.2x 6 mm² (TME..T) und (TME..V)

Lieferumfang: - 1 Herzdraht mit bipolarer Verzweigung
 - 2 Adapter
 1x weiß + 1x blau (2mm Pin)

Product Description

TME are used for optimal therapy of postoperative cardiac disrhythmia. Fixation in the myocard is either by the zigzag shape of the wire (type: TME..Z) or by tines (type: TME..T). Heartwires with a V- resp. L-fixation (type: TME..V, TME..L) are used for atraumatic fixation (with the help of suture material) in atrial stimulation. TME can directly be connected to an external pacemaker by cutting off the thoracic needle and fixing the non insulated ends of the wires to the adapters.

Number of poles:bipolar
 Length:60 cm / 220 cm
 Material of wire:stainless steel
 Insulation:Polyethylene
 Outer diameter of insulation:2x 0.45 mm
 Color:blue / blue
 Heart needle:curved
 Thoracic needle:curved
 Electrodes:stainless steel
 Diameter of wire:2x 0.20 mm
 Surface area:2x 10 mm² (TME..Z, TME..L) or2x 6 mm² (TME..T) and (TME..V)

Delivery volume: - 1 heartwire with bipolar bifurcation
 - 2 adapters
 1x white+ 1x blue (2mm pin)

Artikelbezeichnung Product Name

Artikel-Nr. Article-no.

Stück Unit

TME..Z (bipolar-bifurcated)

TME2 67-Z 60 cm
 TME2 67-Z 220 cm

46031 25
 45043 25

TME..T (bipolar-bifurcated)

TME2 67-T 60 cm
 TME2 67-T 220 cm

46033-01 25
 45044-01 25

TME..V (bipolar-bifurcated)

TME2 67-V 60 cm
 TME2 67-V 220 cm

45028 25
 45045 25

TME..L (bipolar-bifurcated)

TME2 67-L 60 cm
 TME2 67-L 220 cm

45111 25
 45113 25

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
 Für Einmalgebrauch bestimmt!
 Goods supplied gas-sterilized.
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
 The right to make technical improvements without notice is reserved.