


# TME bipolar

## Temporäre Myokard-Elektrode (Herzdraht)

## Temporary Myocardial-Lead (Heartwire)

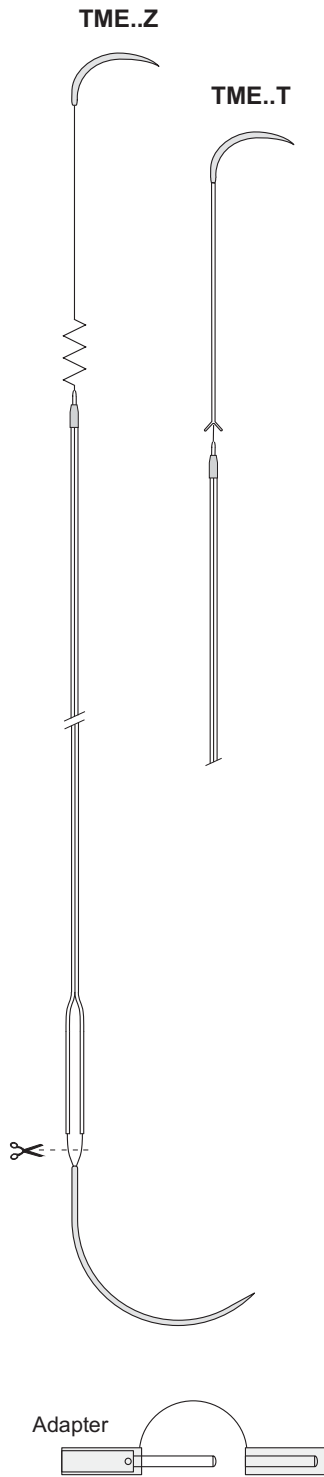

### Artikelbeschreibung

TME werden zur optimalen Therapie post-operativer Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Die Verankerung im Myokard erfolgt entweder durch eine Zick-Zack Biegung im Herzdraht (Typ: TME..Z) oder durch Anker/Tines (Typ:TME..T). TME können per Adapter direkt am externen Herzschrittmacher angeschlossen werden, wozu die Thoraxnadel abgeschnitten und das frei-liegende Drahtende an den Adapter fixiert wird.

Anzahl der Pole: .....bipolar  
 Länge:.....60 cm / 220 cm  
 Drahtmaterial:.....Edelstahl  
 Isolierung:.....Polyethylen  
 Außendurchmesser Isolierung:.....2x 0,45 mm  
 Farbe: .....blau / blau  
 Herznadel: .....gebogen  
 Thoraxnadel:.....gebogen

Distale Elektrode:  
 Litzendurchmesser: .....0,20 mm  
 Oberfläche:.....10 mm<sup>2</sup> (TME..Z) bzw.  
 .....6 mm<sup>2</sup> (TME..T)

Proximale Elektrode: .....Edelstahl  
 Durchmesser Edelstahlhülse:.....0,8 mm  
 Oberfläche:.....10 mm<sup>2</sup>  
 Elektrodenabstand: .....2,5 mm

Lieferumfang: - 1 bipolarer Herzdraht  
 - 2 Adapter  
 1x blau + 1x weiß (2mm Pin)

### Product Description

TME are used for optimal therapy of postoperative cardiac disrhythmia. Fixation in the myocard is either by the zigzag shape of the wire (type: TME..Z) or by tines (type:TME..T). TME can directly be connected to an external pacemaker by cutting off the thoracic needle and fixing the non insulated end of the wires to the adapter.

Number of poles: .....bipolar  
 Length: .....60 cm / 220 cm  
 Material of wire:.....stainless steel  
 Insulation:.....Polyethylene  
 Outer diameter of insulation:.....2x 0.45 mm  
 Color: .....blue / blue  
 Heart needle:.....curved  
 Thorax needle: .....curved

Distale elektrode:  
 Diameter of wire: .....0.20 mm  
 Surface area:.....10 mm<sup>2</sup> (TME..Z) or  
 .....6 mm<sup>2</sup> (TME..T)

Proximal electrode: .....stainless steel  
 Diameter stainless steel-hull: .....0.8 mm  
 Surface:.....10 mm<sup>2</sup>  
 Electrode distance: .....2.5 mm

Lieferumfang: - 1 bipolarer Herzdraht  
 - 2 Adapter  
 1x blau + 1x weiß (2mm Pin)

### Artikelbezeichnung Product name

### Artikel-Nr. Article-no.

### Stück Unit

#### TME..Z (bipolar)

TME2 66-Z 60 cm  
 TME2 66-Z 220 cm

45009-02 25  
 45041-02 25

#### TME..T (bipolar)

TME2 66-T 60 cm  
 TME2 66-T 220 cm  
 TME2 66-T 220 cm mit PE-Schutzschlauch  
 with protectiv PE-tubing

46013-02 25  
 45042-02 25  
 S5676-01 25

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.  
 Für Einmalgebrauch bestimmt!  
 Goods supplied gas-sterilized.  
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
 The right to make technical improvements without notice is reserved.