


LASSOS® / CATCHER®

Interventional and Pediatric Cardiology

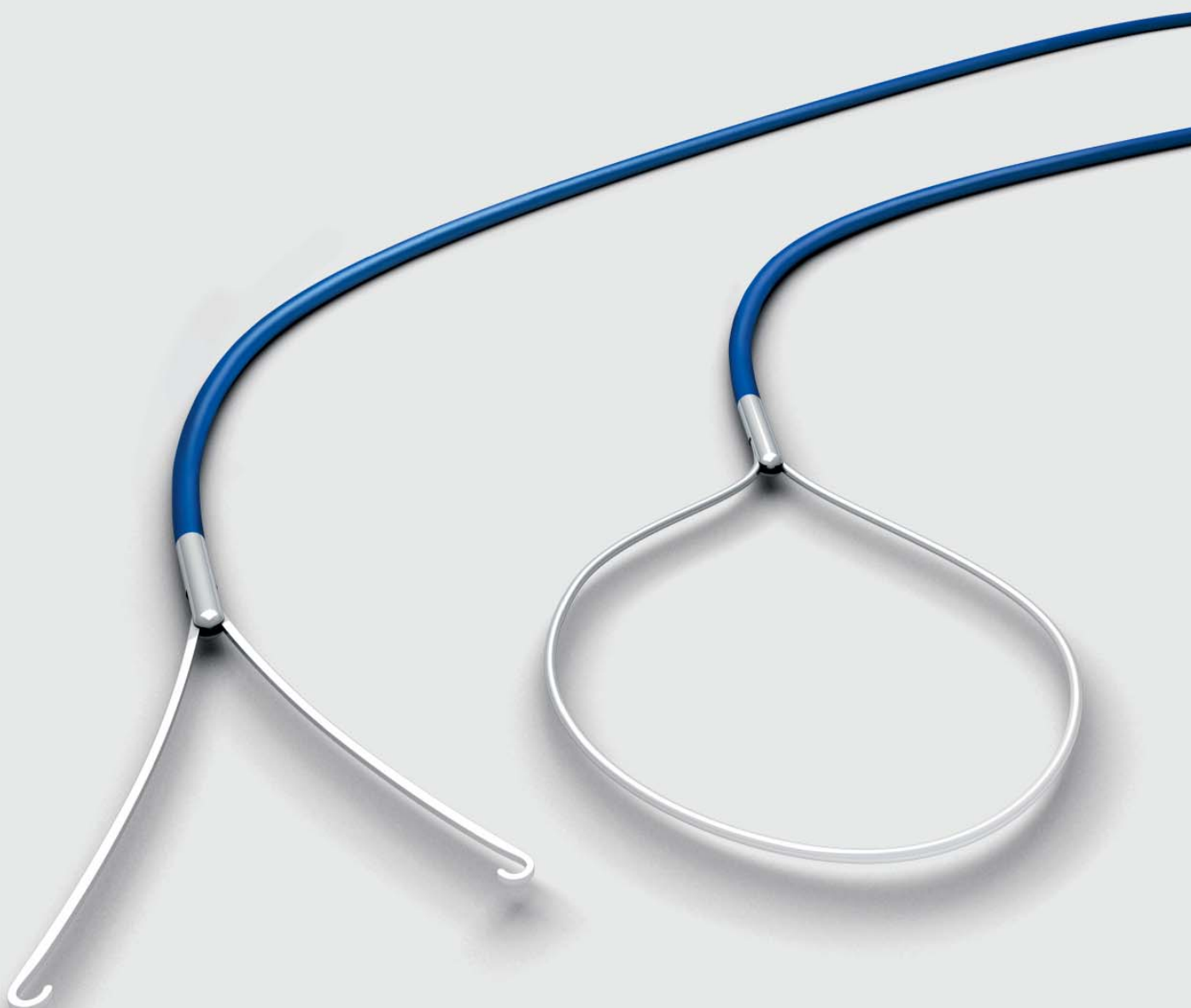

+++

LASSOS® – Schlingenkatheter / CATCHER® – Fangkatheter
LASSOS® – Snare Catheter / CATCHER® – Forceps Catheter

 **OSYPKA**
Technology for an active life

LASSOS®

LASSOS® – Schlingenkatheter


LASSOS® ist ein Schlingenkatheter, dessen Fangschlinge stufenlos bis maximal 40 mm Durchmesser ausgefahren werden kann. Sie besteht aus hoch-flexiblem, knickresistentem und extrem formstabilem Nitinol.

Indikationen:

- Einfangen und Entfernen von Fremdkörpern aus dem Gefäßsystem
- Entfernen von Schrittmacherelektroden

Besondere Eigenschaften:

- Anstellwinkel von 45° und 90° je nach Modell
- Schlinge vollständig einziehbar
- Atraumatische Katheterspitze

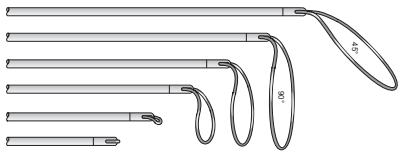

LASSOS® – Snare Catheter

LASSOS® is a snare catheter with a loop that can be extended smoothly up to 40 mm in diameter. It is made out of highly flexible, buckle-resistant and shape-maintaining Nitinol.

Indication:

- To catch and retrieve foreign bodies out of the vascular system
- Extraction of permanent pacing leads

Special Features:

- Angle of the snare in relation to the shaft: 45° or 90° dependent on the model
- Snare can be completely retracted into the shaft
- Atraumatic tip of the shaft

* Ein Luer-Lock-Anschluss ermöglicht das einfache Entlüften beider Kathedertypen. / A sideport allows to de-air both catheter types safely.

CATCHER®

CATCHER® – Fangkatheter


CATCHER® ist ein Fangkatheter mit ausfahrbaren Fangarmen, die sich dabei stufenlos bis zu ~12 mm auseinander spreizen. Die Fangarme sind aus medizinischem Edelstahl gefertigt.

Indikationen:

- Einfangen und Entfernen von Fremdkörpern aus dem Gefäßsystem

Besondere Eigenschaften:

- Fangarme nahezu vollständig einziehbar

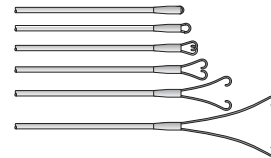

CATCHER® – Forceps Catheter

CATCHER® is a forceps catheter with medical grade stainless steel tentacles that can smoothly be extended up to ~12 mm in width.

Indication:

- To catch and retrieve foreign bodies out of the vascular system

Special Features:

- Tentacles can be retracted close to the catheter

Bestellinformationen / Ordering information:

	Artikel-Nr. Article No.	Öffnungsweite Opening width	Anstellwinkel Loop angle	Schaftgröße Shaft size	Empfohlene Schleuse Recommended introducer	Nutzbare Länge Usable length
LASSOS®	22792	0-40 mm	45°	1.75 mm	> 5.5 F	110 cm
	22793	0-40 mm	90°	1.75 mm	> 5.5 F	110 cm
CATCHER®	07091	0-~12 mm	-	1.75 mm	> 5.5 F	110 cm




Für den Einmalgebrauch bestimmt!

For single use only!



Gebrauchsanleitung beachten

Consult instructions for use

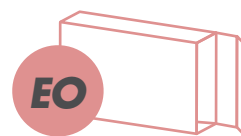

EO-Sterilisiert

EO-sterilized



OSYPKA

Technology for an active life