


LASSOS

Schlingenkatheter

Snare catheter

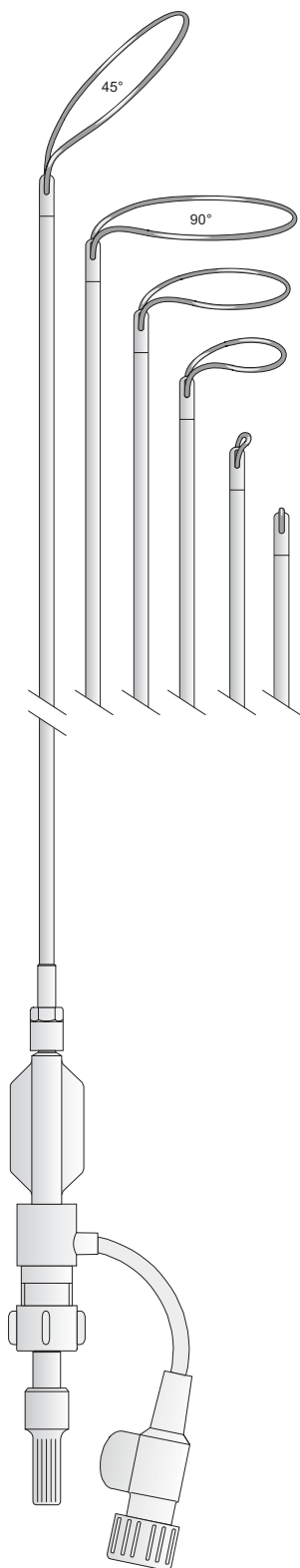

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
Für Einmalgebrauch bestimmt!
Goods supplied gas-sterilized.
For one time use only!

Artikelbeschreibung

LASSOS ist ein Schlingenkatheter zum Einfangen und Entfernen von Fremdkörpern aus dem Gefäßsystem.

Die LASSOS-Schlinge kann stufenlos bis maximal 40 mm Durchmesser ausgefahren werden.

Die LASSOS-Schlinge aus hochflexiblem, knickresistentem und extrem formstabilem Nitinol garantiert stets eine Öffnung im gewählten Anstellwinkel zum Schaft.

Die LASSOS-Schlinge kann mit 90° oder 45° Anstellwinkel bestellt werden.

Die LASSOS-Schlinge kann vollständig in den Katheter zurückgezogen werden, so daß kein Schlingenende vom Katheterschaft absteht.

Der LASSOS-Katheter besitzt eine atraumatische, runde Katheterspitze, die Verletzungen während des Einführens verhindert.

LASSOS ist in verschiedenen Größen lieferbar.

Typ: **LASSOS**

Schlingen-Durchmesser 0 - 40 mm

Anstellwinkel wahlweise 90° bzw 45°

Katheter Länge 110 cm

Product Description

LASSOS is a snare catheter designed to catch and retrieve foreign bodies out of the vascular system.

The LASSOS loop can be extended continuously up to a maximum of 40 mm diameter.

The LASSOS loop is made out of highly flexible, buckle-resistant and extreme shape-maintaining Nitinol which always guarantees an opening in the chosen angle towards the shaft.

The LASSOS loop can be ordered either with 45° or 90° loop angle.

The LASSOS loop can be completely retracted, so that there is no loop left projecting from the shaft.

With its non-traumatic rounded catheter tip the LASSOS loop prevents injury during introduction.

LASSOS is available in different sizes.

Typ: **LASSOS**

Loop Diameter 0 - 40 mm

Loop Angle optional 90° or 45°

Catheter Length 110 cm

Artikelbezeichnung Product name

Artikel-Nr. Article-no.

Stück Unit

LASSOS

Schlingen-Durchm. Loop-Diameter	Anstellwinkel Loop Angle	Empf. Schleuse Recom. Introd.	Kath. Länge Cath. Length	Artikel-Nr. Article-no.	Stück Unit
0 - 40 mm	45°	5 F	110 cm	22792	1
0 - 40 mm	90°	5 F	110 cm	22793	1

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
The right to make technical improvements without notice is reserved.