


Single Pass TUA-II VDD

Vierpolige Temp. Elektrode mit festem Anschlußstecker
 Quadripolar temporary electrode with fixed connector

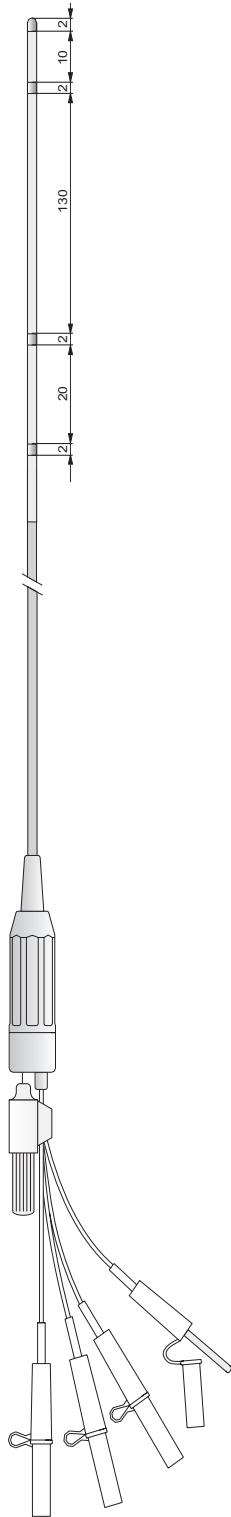

Artikelbeschreibung

Single Pass VDD
 Vierpolige temporäre Elektrode mit festem Konnektor in den Größen 4 F, 5 F und 6 F. Eine einzige Elektrode ermöglicht die bipolare Aufnahme von Vorhof- und Ventrikelsignalen sowie die bipolare Stimulation des Ventrikels (**VDD-Modus**).

Elektroden-Typ: **TUA-II VDD**
 Katheterdurchmesser: 4F - 5F - 6F
 Katheterdurchmesser (mm) 1,33 - 1,67 - 2,00
 Nutzbare Katheterlänge: 110 cm
 Elektrodenkopf: *Halbkugel*
 Anzahl der Elektroden: 4-polig
 Elektrodenlänge: 2 mm
 Elektrodenabstand: 10 - 130 - 20 mm
 Elektrodenmaterial: *Edelstahl*
 Elektrischer Widerstand: < 100 Ohm
 Kathetermaterial: *Kunststoff*
 (medizinische Qualität)
 röntgenkontrastgebend
 Anschluß: *fester Anschlußstecker mit*
 *2 mm Pins und Berührungsschutzkappen*
 *passend für alle gängigen externen Herzschrittmacher*

Lieferumfang: - 1 Elektrode mit Mandrin und festem Konnektor
 - 1 Ersatzmandrin

Product Description

Single Pass VDD
 Quadripolar temporary electrode with fixed connector of the sizes 4 F, 5 F, and 6 F. One electrode only enables a bipolar recording of the atrial and ventricular signals and the bipolar stimulation of the ventricle (**VDD mode**).

Type: **TUA-II VDD**
 Lead diameter: 4F - 5F - 6F
 Lead diameter (mm) 1.33 - 1.67 - 2.00
 Usable lead length: 110 cm
 Electrode tip: *bullet shaped*
 Number of electrodes: *quadripolar*
 Electrode length: 2 mm
 Distance between electrodes: ... 10 - 130 - 20 mm
 Electrode material: *stainless steel*
 Electrical resistance: < 100 Ohm
 Lead material: *plastic*
 (medical grade)
 *radiopaque*
 Connector: *fixed connector with*
 *2 mm pins and touch protection*
 *caps suitable for all common external pacemakers*

Delivery volume: - 1 Lead with stylet and fixed connector
 - 1 Extra stylet

Artikelbezeichnung Product name

TUA-II VDD, 4-polig / quadripolar

TUA-II VDD 4 F	(110 cm, 4F)
TUA-II VDD 5 F	(110 cm, 5F)
TUA-II VDD 6 F	(110 cm, 6F)

Artikel-Nr. Article-no.

TA08990125
TA08990126
TA08990127

Stück Unit

5
5
5

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
 Für Einmalgebrauch bestimmt!
 Goods supplied gas-sterilized.
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
 The right to make technical improvements without notice is reserved.