


# VC VM VIS

## Elektrodenverlängerung

## Lead Extension

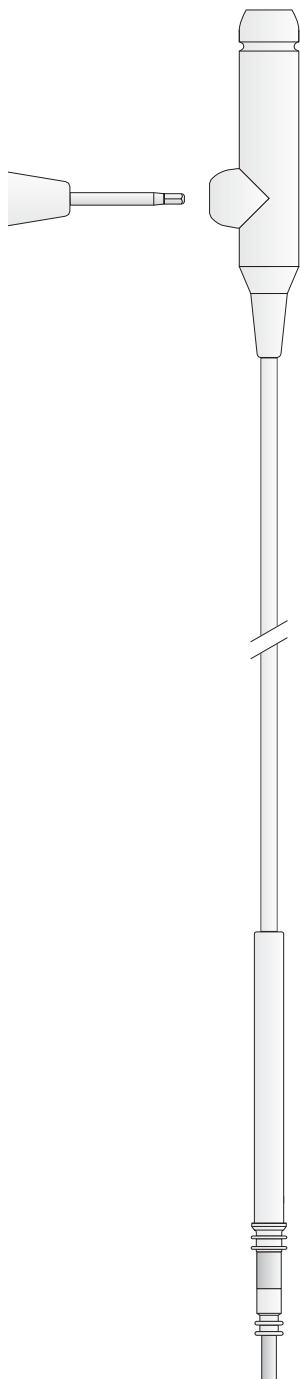

### Artikelbeschreibung

Die Elektrodenverlängerungen VC, VM und VIS dienen zur Konnektierung eines unipolaren Herzschrittmachers mit IS-1 Anschluß, 5 mm Anschluß oder 6 mm Anschluß an eine liegende Schrittmacher-Elektrode, ohne deren Stecker zu entfernen.

Dabei ist an der einen Seite der Verlängerung ein IS-1 Stecker montiert, an der anderen Seite ist eine 5 mm (Medtronic), 6 mm (Cordis) oder IS-1 Aufnahme montiert.

Mit Hilfe der Elektrodenverlängerungen VC, VM und VIS erreicht man, daß eine liegende Elektrode verlängert und/oder ein neuer Stecker montiert werden kann, ohne daß die gesamte Elektrode revidiert oder der alte Stecker entfernt werden muß.

Typ: ..... **VC VM VIS**  
 Länge: ..... *10 cm, 40 cm*  
 Wendelaufbau: ..... *4-fach gewandelt*  
 Isolation: ..... *Silikon (med. Qualität)*

Lieferumfang: - 1 Elektrodenverlängerung  
 - 1 Sechskantschlüssel

### Product Description

The lead extensions VC, VM and VIS serve to connect an unipolar pacemaker with an IS-1, 5 mm or 6 mm connection to an implanted lead without removing the existing connector.

At one side an IS-1 connector is mounted, at the other side either a 5 mm (Medtronic) receptacle or a 6 mm (Cordis) receptacle or an IS-1 receptacle is mounted.

The lead extensions VC, VM and VIS offer the possibility to extend an implanted lead and to connect a new type of connector, without removing the lead and cutting of the old connector.

Type: ..... **VC VM VIS**  
 Length: ..... *10 cm, 40 cm*  
 Coil: ..... *quadrifilar*  
 Insulation: ..... *Silicone (med. grade)*

Delivery volume: - 1 Lead extension  
 - 1 Allen wrench

### Artikelbezeichnung

Product name

### Artikel-Nr.

Article-no.

### Stück

Unit

#### Elektrodenverlängerung mit IS-1 Anschlußstecker

#### Lead Extension with Connector Pin IS-1

Typ	Länge	Anschlußstecker	Aufnahme		
Type	Length	Connector pin	Receptacle		
VC 17	10 cm	IS-1	6 mm	53905	1
VC 47	40 cm	IS-1	6 mm	53407	1
VM 17	10 cm	IS-1	5 mm	53904	1
VM 47	40 cm	IS-1	5 mm	53408	1
VIS 17	10 cm	IS-1	IS-1	53417	1
VIS 47	40 cm	IS-1	IS-1	53413	1

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.  
 Für Einmalgebrauch bestimmt!  
 Goods supplied gas-sterilized.  
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
 The right to make technical improvements without notice is reserved.