


TME bipolar

Temporäre Myokard-Elektrode (Herzdraht)

Temporary Myocardial-Lead (Heartwire)

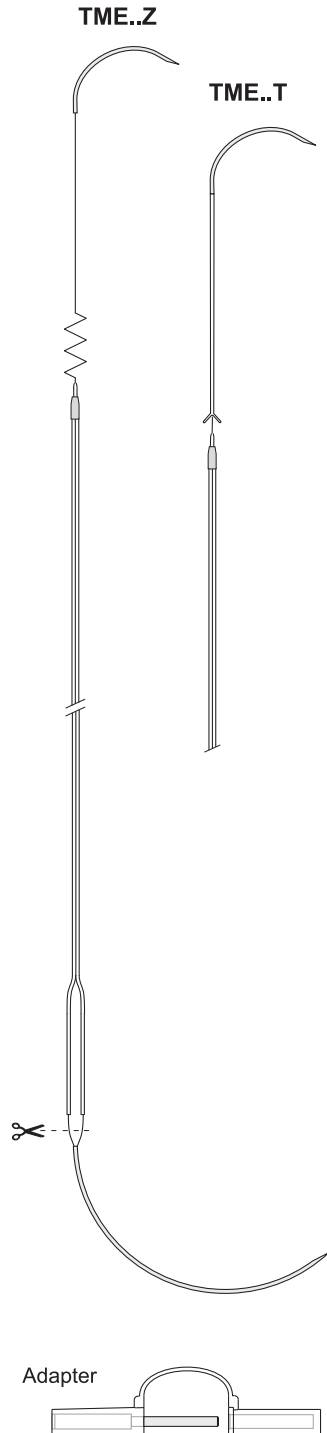

Artikelbeschreibung

TME werden zur optimalen Therapie post-operativer Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Die Verankerung im Myokard erfolgt entweder durch eine Zick-Zack Biegung im Herzdraht (Typ: TME..Z) oder durch Anker/Tines (Typ: TME..T). TME können per Adapter direkt am externen Herzschrittmacher angeschlossen werden, wozu die Thoraxnadel abgeschnitten und das frei-liegende Drahtende an den Adapter fixiert wird.

Anzahl der Pole:bipolar
 Länge:.....60 cm / 220 cm
 Drahtmaterial:Edelstahl
 Isolierung:Polyethylen
 Außendurchmesser Isolierung:.....2x 0,45 mm
 Farbe:blau / blau
 Herznadel:gebogen
 Thoraxnadel:.....gebogen

Distale Elektrode:
 Litzendurchmesser:0,20 mm
 Oberfläche:10 mm² (TME..Z) bzw.
6 mm² (TME..T)

Proximale Elektrode:.....Edelstahl
 Durchmesser Edelstahlhülse:.....0,8 mm
 Oberfläche:.....10 mm²
 Elektrodenabstand:2,5 mm

Lieferumfang: - 1 bipolarer Herzdraht
 - 2 Adapter
 1x blau + 1x weiß (2mm Pin)

Product Description

TME are used for optimal therapy of postoperative cardiac disrhythmia. Fixation in the myocard is either by the zigzag shape of the wire (type: TME..Z) or by tines (type: TME..T). TME can directly be connected to an external pacemaker by cutting off the thoracic needle and fixing the non insulated end of the wires to the adapter.

Number of poles:bipolar
 Length:60 cm / 220 cm
 Material of wire:stainless steel
 Insulation:Polyethylene
 Outer diameter of insulation:.....2x 0.45 mm
 Color:blue / blue
 Heart needle:.....curved
 Thorax needle:curved

Distale elektrode:
 Diameter of wire:0.20 mm
 Surface area:10 mm² (TME..Z) or
6 mm² (TME..T)

Proximal electrode:stainless steel
 Diameter stainless steel-hull:0.8 mm
 Surface:10 mm²
 Electrode distance:2.5 mm

Delivery volume: - 1 bipolar heartwire
 - 2 adapters
 1x blue + 1x white (2mm pin)

Artikelbezeichnung Product name

Artikel-Nr. Article-no.

Stück Unit

TME..Z (bipolar)

TME2 66-Z 60 cm
 TME2 66-Z 220 cm

45009-02 25
 45041-02 25

TME..T (bipolar)

TME2 66-T 60 cm
 TME2 66-T 220 cm
 TME2 66-T 220 cm

mit PE-Schutzschlauch
 with protectiv PE-tubing

46013-02 25
 45042-02 25
 S5676-01 25

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
 Für Einmalgebrauch bestimmt!
 Goods supplied gas-sterilized.
 For single use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
 Changes in the interest of technical progress are reserved.

Osyпка AG

Earl-H.-Wood-Str. 1, 79618 Rheinfelden, Germany
 Tel.+49(0)7623 7405-0, Fax+49(0)7623 7405-213
 E-mail: mail@osypka.de, Internet: www.osypka.de

TM10141111DA1_TME-bipolar

 **OSYPKA**