


# TME quadripolar

## Temporäre Myokard-Elektrode (Herzdraht)

## Temporary Myocardial-Lead (Heartwire)

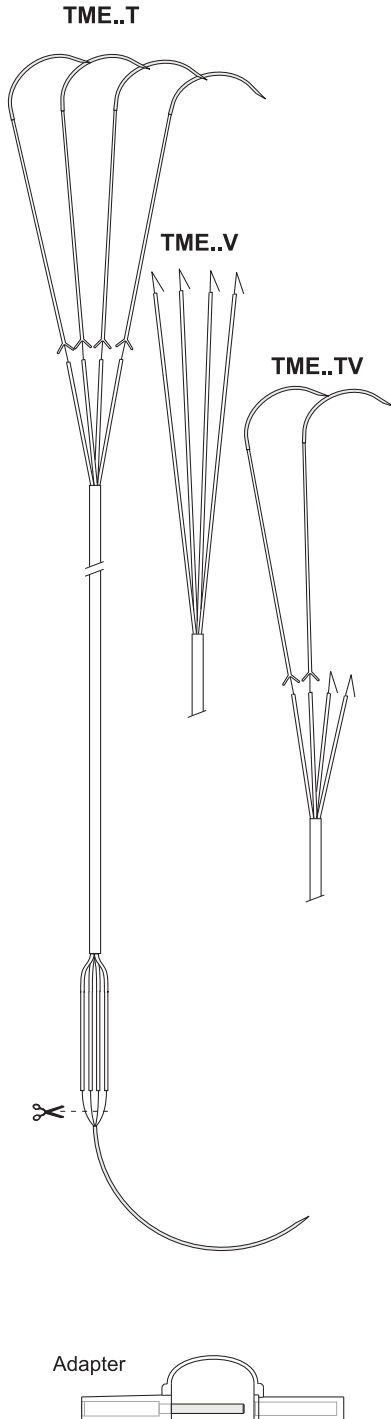

### Artikelbeschreibung

Vierpolige TME werden zur optimalen Therapie post-operativer Herzrhythmusstörungen eingesetzt.  
Die Verankerung im Myokard erfolgt durch Anker/Tines (Typ:TME..T).  
TME mit V-Verankerung (Typ: TME..V) werden zur atraumatischen Fixierung (mittels chirurgischem Nahtmaterial) für die atriale Stimulation eingesetzt.  
TME können per Adapter direkt am externen Herzschrittmacher angeschlossen werden, wozu die Thoraxnadel abgeschnitten und die frei-liegenden Drahtenden an den Adaptern fixiert werden.

Anzahl der Pole: ..... vierpolig  
Länge: ..... 60 cm / 220 cm  
Drahtmaterial: ..... Edelstahl  
Isolierung: ..... Polyethylen  
Außendurchmesser Isolierung: ..... 4x 0,45 mm  
Farbe: ..... blau / weiß  
Schutzschlauch: ..... Polyethylen  
Schutzschlauchdurchmesser: ..... 1,50 mm  
Herznadel: ..... gebogen  
Thoraxnadel: ..... gebogen  
Elektroden:  
Litzendurchmesser: ..... 0,20 mm  
Oberfläche: ..... 4x 6 mm<sup>2</sup> (TME..T, TME..TV, TME..V)

Lieferumfang: - 1 vierpoliger Herzdraht  
- 4 Adapter  
2x weiß + 2x blau (2mm Pin)

### Product Description

Quadripolar TME are used for optimal therapy of postoperative cardiac dysrhythmia.  
Fixation in the myocardium is by tines (type:TME..T).  
Heartwires with a V-fixation (type: TME..V) are used for atraumatic fixation (with the help of suture material) in atrial stimulation.  
TME can directly be connected to an external pacemaker by cutting off the thoracic needle and fixing the non insulated ends of the wires to the adapters.

Number of poles: .....quadripolar  
Length: .....60 cm / 220 cm  
Material of wire: .....stainless steel  
Insulation: ..... Polyethylene  
Outer diameter of insulation: ..... 4x 0.45 mm  
Color: ..... blue / white  
Protective tubing: ..... Polyethylene  
Protective tubing diameter: ..... 1,50 mm  
Heart needle: ..... curved  
Thoracic needle: ..... curved  
Electrodes:  
Diameter of wire: .....0.20 mm  
Surface area: 4x 6 mm<sup>2</sup> (TME..T, TME..TV, TME..V)

Delivery volume: - 1 quadripolar heartwire  
- 4 adapters  
2x white+2x blue (2mm pin)

Artikelbezeichnung Product Name	Länge: Bifurkation-Pol Length: Bifurcation-pole	Artikel-Nr. Article-no.	Stück Unit
<b>TME..T (quadripolar)</b>			
TME4-68T 60 cm	27 cm	47005-01	25
TME4-68T 220 cm	27 cm	45046-01	25
<b>TME..V (quadripolar)</b>			
TME4-68V 220 cm	27 cm	45050	25
<b>TME..TV (quadripolar)</b>			
TME4-68TV 220 cm	17 cm	45067-10	25
TME4-68TV 220 cm	27 cm	45052-01	25

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.  
Für Einmalgebrauch bestimmt!  
Goods supplied gas-sterilized.  
For single use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
Changes in the interest of technical progress are reserved.