


CATCHER®

Fangkatheter

Forceps catheter

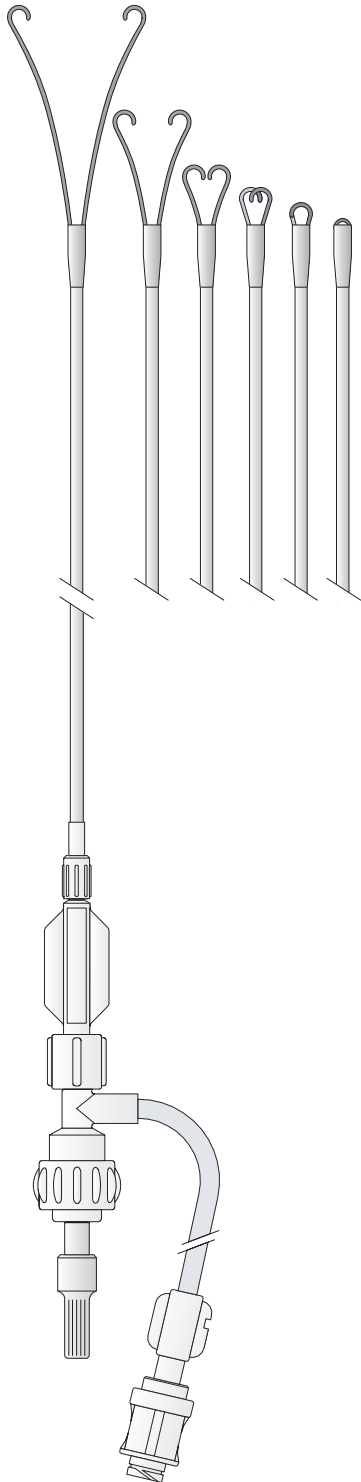

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
Für Einmalgebrauch bestimmt!
Goods supplied gas-sterilized.
For one time use only!

Artikelbeschreibung

CATCHER® ist ein Fangkatheter zum Einfangen und Entfernen von Fremdkörpern.
Die CATCHER® Fangarme sind aus medizinischem Edelstahl gefertigt.
Durch Vorschub des zentralen Stilettts werden die Fangarme des CATCHER® ausgefahren.
Die CATCHER® Fangarme können vollständig an den Katheter zurückgezogen werden, so daß die Gefäße beim Einführen des Katheters nicht verletzt werden.
Ein Sideportschlauch mit Split-Septum-Sicherheitskonnektor ermöglicht ein einfaches Entlüften des Katheters.

Typ:..... **CATCHER®**
Katheter Länge..... 110 cm
Max. Fangarm-Abstand..... 12 mm
Katheter-Material..... *Röntgenkontrastgebender Geflechtsschlauch aus Pebax® (Polyether Block Amid, weichmacherfrei) und Edelstahl*
Fangarm-Material *Edelstahl*
Sideportschlauch-Material *PC, PVC*
Sicherheitskonnektor..... *PC, Silikon*

Product Description

CATCHER® is a forceps catheter to catch and retrieve foreign objects.
The CATCHER's forceps is made out of medical grade stainless steel.
By pushing the central stylet, the forceps of CATCHER® is extended.
The CATCHER's forceps can be retracted close to the catheter to prevent injury during insertion.
A sideport tube with a split-septum needle-free adapter allows an easy de-airing of the catheter.

Typ:..... **CATCHER®**
Catheter Length..... 110 cm
Max. Forceps Span 12 mm
Catheter Material..... *X-ray visible shaft tube made of Pebax® (polyether block amide, plasticizer-free) and stainless steel*
Forceps Material..... *Stainless steel*
Sideport Tube Material *PC, PVC*
Needle-free Adapter *PC, silicone*

Artikelbezeichnung Product name

**Artikel-Nr.
Article-no.** **Stück
Unit**

CATCHER®

Empfohlene Schleuse Katheter Länge
Recommended Introducer Catheter Length
5.5 F 110 cm

07091

1

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
The right to make technical improvements without notice is reserved.