


# LASSOS®

## Schlingenkatheter

## Snare catheter

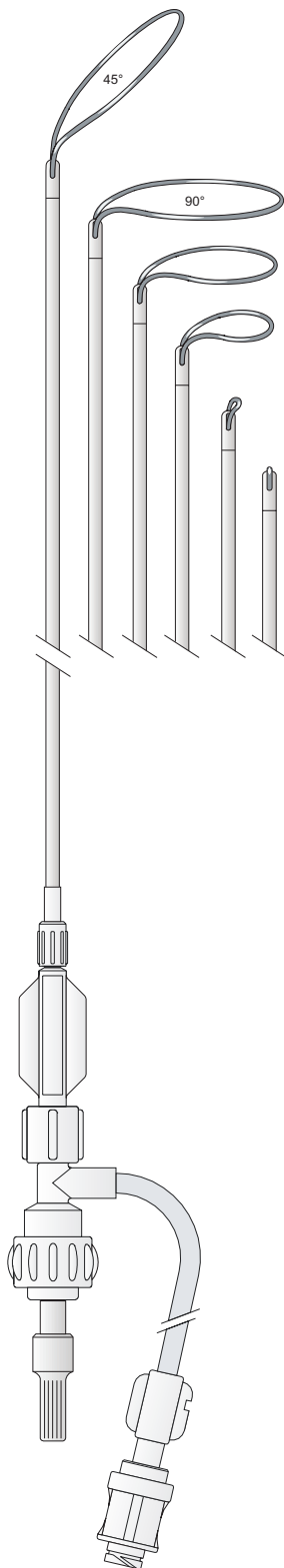

### Artikelbeschreibung

**LASSOS®** ist ein Schlingenkatheter zum Einfangen und Entfernen von Fremdkörpern aus dem Gefäßsystem.

Die LASSOS®-Schlinge kann stufenlos bis maximal 40 mm Durchmesser ausgefahren werden.

Die LASSOS®-Schlinge aus hochflexiblem, knickresistentem und extrem formstabilem Nitinol garantiert stets eine Öffnung im gewählten Anstellwinkel zum Schaft.

Die LASSOS®-Schlinge kann mit 90° oder 45° Anstellwinkel bestellt werden.

Die LASSOS®-Schlinge kann vollständig in den Katheter zurückgezogen werden, so daß kein Schlingenende vom Katheterschaft absteht.

Der LASSOS®-Katheter besitzt eine atraumatische, runde Katheterspitze, die Verletzungen während des Einführens verhindert.

Ein Sideportschlauch mit Split-Septum-Sicherheitskonnektor ermöglicht ein einfaches Entlüften des Katheters.

Typ:..... **LASSOS®**  
 Schlingen-Durchmesser ..... 0 - 40 mm  
 Anstellwinkel wahlweise ..... 90° bzw. 45°  
 Katheter Länge ..... 110 cm  
 Katheter-Material ..... Röntgenkontrastgebender Geflechtsschlauch aus Pebax® (Polyether Block Amid, weichmacherfrei) und Edelstahl  
 Schlingen-Material ..... Edelstahl, Nitinol  
 Sideportschlauch-Material ..... PVC  
 Sicherheitskonnektor ..... PC, Silikon

### Product Description

**LASSOS®** is a snare catheter designed to catch and retrieve foreign objects out of the vascular system.

The LASSOS® loop can be extended continuously up to a maximum of 40 mm diameter.

The LASSOS® loop is made out of highly flexible, buckle-resistant and extreme shape-maintaining Nitinol which always guarantees an opening in the chosen angle towards the shaft.

The LASSOS® loop can be ordered either with 45° or 90° loop angle.

The LASSOS® loop can be completely retracted, so that there is no loop left projecting from the shaft.

With its non-traumatic rounded catheter tip the LASSOS® loop prevents injury during introduction.

A sideport tube with a split-septum needle-free adapter allows an easy de-airing of the catheter.

Type:..... **LASSOS®**  
 Loop Diameter ..... 0 - 40 mm  
 Loop Angle optional ..... 90° or 45°  
 Catheter Length ..... 110 cm  
 Catheter Material ..... X-ray visible shaft tube made of Pebax® (polyether block amide, plasticizer-free) and stainless steel  
 Loop Material ..... Stainless steel, Nitinol  
 Sideport Tube Material ..... PVC  
 Needle-free Adapter ..... PC, silicone

### Artikelbezeichnung Product name

### Artikel-Nr. Article-no.

### Stück Unit

#### LASSOS®

Schlingen-Durchm. Loop-Diameter	Anstellwinkel Loop Angle	Empf. Schleuse Recom. Introd.	Kath. Länge Cath. Length	Artikel-Nr. Article-no.	Stück Unit
0 - 40 mm	45°	5.5 F	110 cm	22792	1
0 - 40 mm	90°	5.5 F	110 cm	22793	1

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.  
Für Einmalgebrauch bestimmt!  
Goods supplied gas-sterilized.  
For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
The right to make technical improvements without notice is reserved.