


Baby TME unipolar / bipolar


Temporäre Myokard-Elektrode (Herzdraht) für Babys

Temporary Myocardial-Lead (Heartwire) for Babies

TME..S uni/bi

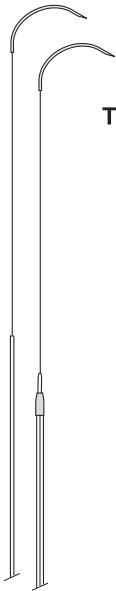


TME..Z uni/bi

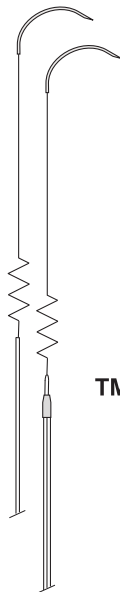


TME..V uni



TME..S bif

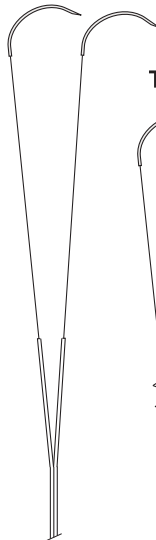


TME..Z bif

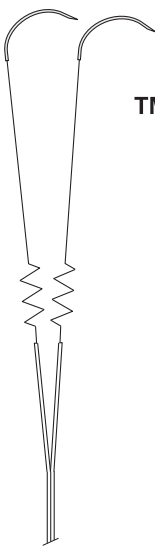

TME..V bif



Adapter

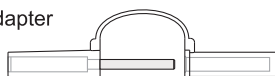

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
Für Einmalgebrauch bestimmt!
Goods supplied gas-sterilized.
For single use only!

Artikelbeschreibung

Baby TME werden zur optimalen Therapie postoperativer Herzrhythmusstörungen speziell bei kleineren Herzen eingesetzt.

Die Babyelektrode verfügt über sehr feine Herz- und Thoraxnadeln und Litzen. Dadurch sind ausgezeichnete Stimmulations- und Wahrnehmungseigenschaften, sowie eine einfache Handhabung gewährleistet.

Die Verankerung im Myokard erfolgt durch unterschiedliche Fixierungen.

Baby TME können per Adapter direkt am externen Herzschrittmacher angeschlossen werden, wozu die Thoraxnadel abgeschnitten und die freiliegenden Drahtenden an den Adaptern fixiert werden.

Anzahl der Pole:unipolar / bipolar
Länge:60 cm
Drahtmaterial:Edelstahl
Isolierung:Polyethylen
Außendurchmesser Isolierung:0,30 mm
Farbe:weiß/blau
Herznadel:Ø 0,30 mm, gebogen
Thoraxnadel:Ø 0,50 mm, gebogen
Elektrode:Edelstahl
Litzendurchmesser:0,15 mm
Oberfläche:10 mm² (TME..Z, TME..S) bzw.6 mm² (TME..V)

Lieferumfang: - Herzdraht
- Adapter (2mm Pin)

Product Description

Baby TME are used for optimal therapy of post-operative cardiac arrhythmias especially for smaller hearts.

Baby TME have very thin heart and thoracic needles and wire diameters. These characteristics assure excellent stimulation and sensing properties, as well as easy handling.

Several fixation options are available.

Baby TME can be directly connected to an external pacemaker by cutting off the thoracic needle and fixing the non-insulated ends of the wires to the adapters.

Number of poles:unipolar / bipolar
Length:60 cm
Material of wire:stainless steel
Insulation:Polyethylene
Outer diameter of insulation:0.30 mm
Color:white/blue
Heart needle:Ø 0.30 mm, curved
Thorax needle:Ø 0.50 mm, curved
Electrodes:stainless steel
Diameter of wire:0.15 mm
Surface area:10 mm² (TME..Z, TME..S) or6 mm² (TME..V)

Delivery volume: - Heartwire
- Adapter (2mm pin)

Artikelbezeichnung Product name

Artikel-Nr. Article-no.

Stück Unit

TME1 40-S	(unipolar)	60 cm	blau/blue	-	45200	25
TME1 40-Z	(unipolar)	60 cm	blau/blue	ZickZack/zig-zag	45201	25
TME1 40-V	(unipolar)	60 cm	blau/blue	V-Form/v-shape	45202	25
TME1 40-S	(unipolar)	60 cm	weiß/white	-	45200WS	25
TME1 40-Z	(unipolar)	60 cm	weiß/white	ZickZack/zig-zag	45201WS	25
TME1 40-V	(unipolar)	60 cm	weiß/white	V-Form/v-shape	45202WS	25
TME2 47-S	(bifurcated)	60 cm	blau/blue	-	45205	25
TME2 47-Z	(bifurcated)	60 cm	blau/blue	Zick-Zack/zig-zag	45206	25
TME2 47-V	(bifurcated)	60 cm	blau/blue	V-Form/v-shape	45207	25
TME2 47-S	(bifurcated)	60 cm	weiß/white	-	45205WS	25
TME2 47-Z	(bifurcated)	60 cm	weiß/white	Zick-Zack/zig-zag	45206WS	25
TME2 47-V	(bifurcated)	60 cm	weiß/white	V-Form/v-shape	45207WS	25

Sonder-Modelle und Sonderlängen auf Anfrage möglich

Please inquire about custom models and lengths

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Changes in the interest of technical progress are reserved.